

Набор струйных тестов SOLO™ для определения овуляции.

Мы благодарны Вам за приобретение тестов SOLO™. Перед тестированием прочитайте внимательно инструкцию.

Введение

Овуляция – выход зрелой, способной к оплодотворению яйцеклетки из фолликула яичника в брюшную полость. Момент овуляции чрезвычайно важен для определения дня, наиболее благоприятного для зачатия (или, наоборот, для предохранения от нежелательной беременности). Периодичность овуляции регулируется лютеинизирующим гормоном (ЛГ). Тесты на овуляцию SOLO™ определяют пик концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ), который повышается за 24-48 часов до выхода яйцеклетки из яичника (в это время наиболее велика вероятность забеременеть). Таким образом, с помощью тестов SOLO™ заранее можно определить дни, наиболее благоприятные для зачатия:

1. День перед овуляцией.
 2. День, когда происходит овуляция.
- В этот период женщины, стремящиеся к материнству, должны уделить больше внимания полноценным половым отношениям со своим партнером. Если женщина использует тест для естественного способа предохранения от беременности, ей нужно воздерживаться от занятий сексом без контрацепции в период овуляции.

Начало тестирования

Сначала необходимо определить продолжительность менструального цикла (количество дней между 1-м днём предыдущей менструации и 1-м днём последующей менструации). Руководствуясь таблицей, определите день начала тестирования. Если Ваш цикл менее 21 дня и более 38 дней, проконсультируйтесь с врачом для определения оптимального времени проведения тестирования. Если Вы не знаете продолжительность Вашего цикла или он имеет непостоянную продолжительность, начинайте тестирование на 11 день после начала менструации, так как средняя продолжительность цикла составляет 28 дней.

| Продолжит. цикла | Начало теста |
|------------------|--------------|
| 21 день | день 6 |
| 22 дня | день 6 |
| 23 дня | день 7 |
| 24 дня | день 7 |
| 25 дней | день 8 |
| 26 дней | день 9 |
| 27 дней | день 10 |
| 28 дней | день 11 |
| 29 дней | день 12 |
| 30 дней | день 13 |
| 31 день | день 14 |
| 32 дня | день 15 |
| 33 дня | день 16 |
| 34 дня | день 17 |
| 35 дней | день 18 |
| 36 дней | день 19 |
| 37 дней | день 20 |
| 38 дней | день 21 |

Каждый день необходимо в одно и то же время суток тестироваться, используя новый тест, пока один из тестов не покажет положительный результат.

Например: Ваш цикл длится 30 дней, значит, согласно таблице, Вам нужно начать тестирование на 13-й день цикла (1-й тест), тест отрицательный. На 14-й и 15-й дни цикла Вы тестируетесь снова (2-й и 3-й тесты), результаты отрицательные. На 16-й день Вы используете 4-й тест и результат положительный. Это означает, что через 24-48 часов произойдет овуляция (время благоприятное для зачатия).

Условия проведения теста


1. Не используйте образцы первой утренней мочи.
2. Наилучшее время для проведения теста с 10 утра до 8 вечера.
3. Проводите тест в одно и то же время каждый день.
4. В течении 2 часов перед проведением теста не рекомендуется пить, так как это влияет на определение пика ЛГ.

Процедура теста

1. Откройте запаянный пакет по линии надрыва. Извлеките тест из пакета. Снимите пластиковый колпачок.



2. Направьте струю мочи на кончик теста, чтобы он был мокрым. Также можно собрать мочу в чистую ёмкость и погрузить кончик струйного теста до обозначенной линии на 10 секунд.

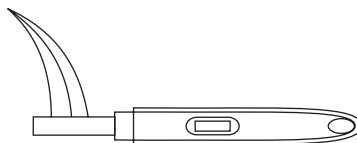

3. Закройте устройство колпачком и подождите появления результатов на протяжении 10 минут. Не принимать к сведению результат после 30 минут.



Интерпретация результатов

1. **Положительный** (пик концентрации ЛГ): если появилась тестовая линия (Т) и она такого же цвета или темнее, чем контрольная линия (С), значит, через 24-48 часов произойдет овуляция и вероятность зачатия в этот период максимальная.
2. **Отрицательный** (овуляции в ближайшие 24-48 часов не произойдет): если тестовая линия (Т) не появилась или значительно бледнее контрольной линии (С), значит, что необходимо на следующий день продолжить тестирование с новым тестом.
3. **Тест недействителен:** не появилась контрольная линия красного/розового цвета. В этом случае следует повторить тестирование с новым тестом SOLO.



Условия хранения

Хранить тест при температуре 2-30°C в темном, сухом и прохладном месте. Не замораживать!

Предостережения

1. Предназначается для диагностики in vitro.
2. Не использовать по истечении срока годности.
3. Тест не предназначен для повторного использования.
4. Тест не предназначен для предотвращения беременности.

Компания «ФАРМАСКО» предлагает Вам быстрые тесты: **DUET™** - струйный тест, определяет беременность через 7-10 дней после зачатия.

SEZAM™ - тест-комплект для определения беременности: ультрачувствительная тест-кассета, пипетка и ёмкость для сбора мочи.

ULTRA™ - ультрачувствительная ЛАБОРАТОРИЯ в КИШЕНИ тест-полоска, определяет беременность через 7 дней после зачатия.

INEXSCREEN™ - тест-кассета для определения беременности с установлением угрозы патологической беременности (внематочной и риска аборта).

CITOLAB™ - диагностические тест-полоски, позволяющие беременной женщине контролировать состояние своего организма (биохимические показатели мочи).

MENOTEST™ - набор струйных тестов для выявления менопаузы в домашних условиях.

SOLO™ – зарегистрированная торговая марка компании «Фармаско» ТОВ «ФАРМАСКО». ЛАБОРАТОРИЯ В КИШЕНИ. 04080, г. Киев, ул. В.Хвойки, 21, тел.: +38 044 537-08-04. e-mail: contact@pharmasco.com, www.pharmasco.com

Регистрационное свидетельство МОЗ Украины №1856/2003 от 16.05.2008. Международный сертификат качества ISO 9001/ISO 13485.

Производитель: IND, Канада

SOLO.Instr.04.09

Набір струменевих тестів SOLO™ для визначення овуляції.

Ми вдячні Вам за придбання струменевих тестів SOLO™. Перед тестуванням прочитайте уважно інструкцію.

Вступ

Овуляція – вихід зрілої, здатної до запліднення яйцеклітини з фолікула яєчника в черевну порожнину. Момент овуляції надзвичайно важливий для визначення дня, найбільш сприятливого для зачаття (або, навпаки, для уникнення небажаної вагітності). Періодичність овуляції регулюється лютеїнізуючим гормоном (ЛГ).

Тести на овуляцію SOLO™ визначають пік концентрації лютеїнізуючого гормону (ЛГ), який підвищується за 24-48 годин до виходу яйцеклітини з яєчника (в цей час найбільш сприятлива вірогідність завагітніти). Таким чином, за допомогою тестів SOLO™ наперед можна визначити дні, найбільш сприятливі для зачаття:

1. День перед овуляцією.

2. День, коли відбувається овуляція.

У цей період жінки, які прагнуть до материнства, повинні приділити більше уваги повноцінним статевим відносинам зі своїм партнером.

Якщо жінка використовує тест для природного способу планування вагітності, їй потрібно утримуватися від занять сексом без контрацепції в період овуляції.

Початок тестування

Спочатку необхідно визначити тривалість менструального циклу (кількість днів між 1-м днем попередньої менструації і 1-м днем наступної менструації). Керуючись таблицею, визначте день початку тестування. Якщо Ваш цикл менше 21 дня і більше 38 днів, проконсультуйтеся з лікарем для визначення оптимального часу проведення тестування. Якщо Ви не знаєте тривалість Вашого циклу або він має непостійну тривалість, починайте тестування на 11 день після початку менструації, оскільки середня тривалість циклу складає 28 днів.

Щодня необхідно в один і той же час доби тестуватися, використовуючи один тест, поки якийсь з тестів не покаже позитивний результат.

| Тривалість циклу | Початок тесту |
|------------------|---------------|
| 21 день | день 6 |
| 22 дні | день 6 |
| 23 дні | день 7 |
| 24 дні | день 7 |
| 25 днів | день 8 |
| 26 днів | день 9 |
| 27 днів | день 10 |
| 28 днів | день 11 |
| 29 днів | день 12 |
| 30 днів | день 13 |
| 31 день | день 14 |
| 32 дні | день 15 |
| 33 дні | день 16 |
| 34 дні | день 17 |
| 35 днів | день 18 |
| 36 днів | день 19 |
| 37 днів | день 20 |
| 38 днів | день 21 |

Наприклад: Ваш цикл триває 30 днів, значить, згідно таблиці, Вам потрібно почати тестування на 13-й день циклу (1-й тест), тест негативний. На 14-й та 15-й дні циклу Ви тестуєтесь знову (2-й і 3-й тести), результати негативні. На 16-й день Ви використовуєте 4-й тест і отримуєте позитивний результат. Це означає, що через 24-48 годин відбудеться овуляція (час сприятливий для зачаття).

Умови проведення тесту


1. Не використовуйте зразки першої ранкової сечі.
2. Найкращий час для проведення теста з 10 ранку до 8 вечора.
3. Проводьте тест в один і той же час кожен день.
4. Протягом 2 годин перед проведенням тесту не рекомендовано пити, бо це впливає на визначення піка ЛГ.

Процедура тесту

1. Відкрийте запаяний пакет по лінії надриву. Витягніть тест з пакету. Зніміть пластиковий ковпачок.



2. Підставте кінчик струменевого тесту під струмінь сечі, щоб став мокрим. Також можна зібрати мочу в чисту ємність і занурити кінчик тесту до позначеної лінії на 10 сек.

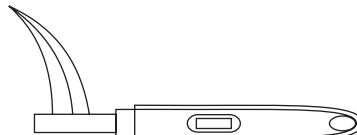

3. Закрийте пристрій ковпачком і почекайте появи результатів впродовж 10 хвилин. Не приймайте до уваги результат після 30 хвилин.



Інтерпретація результатів

1. **Позитивний** (пік концентрації ЛГ): якщо з'явилася тестова лінія (Т) і вона такої ж кольору або темніше, ніж контрольна лінія (С), значить, через 24-48 годин відбудеться овуляція і вірогідність зачаття в цей період максимальна.

2. **Негативний** (овуляція в найближчі 24-48 годин не відбудеться): якщо тестова лінія (Т) не з'явилася або значно блідше за контрольну лінію (С), значить, що необхідно наступного дня продовжити тестування з новим тестом.

3. **Тест недійсний:** не з'явилася контрольна лінія червоного/рожевого кольору. В цьому випадку слід повторити тестування з новим тестом SOLO.

Умови зберігання



Зберігати тест при температурі 2-30°C в темному, сухому і прохолодному місці. Не заморозувати!

Застереження

1. Призначається для діагностики in vitro.
2. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
3. Тест не призначений для повторного використання.
4. Тест не призначений для запобігання вагітності.

Компанія «ФАРМАСКО» пропонує Вам швидкі тести:

DUET™ - струменевий тест, визначає вагітність через 7-10 днів після запліднення.

SEZAM™ - тест-комплект для визначення вагітності: ультрачутлива тест-касета, пипетка і ємкість для збору сечі.

ULTRA™ - ультрачутлива тест-смужка, визначає вагітність через 7 днів після запліднення.

INEXSCREEN™ - тест-касета для визначення вагітності з виявленням зарази патологічної вагітності (позаматкової і ризику аборту).

CITOLAB™ - діагностичні тест-смужки, що дозволяють вагітній жінці контролювати стан свого організму (біохімічні показники сечі).

MEMOTEST™ - набір струменевих тестів для виявлення менопаузи в домашніх умовах.

SOLO™ – зареєстрована торгова марка компанії «Фармаско» ТОВ «ФАРМАСКО». ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ. 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 21, тел.: +38 044 537-08-04. e-mail: contact@pharmasco.com, www.pharmasco.com

Рестраційне свідоцтво МОЗ України №1856/2003 від 16.05.2008. Міжнародний сертифікат якості ISO 9001/ISO 13485. Виробник: IND, Канада